

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact: Colin Walters



SeedOS Ltd

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services
26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom
Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com
Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

SET PER ESPIANTO DI MIDOLLO OSSEO
BONE-MARROW HARVESTING NEEDLE-SET


btt®



■ Mandrino con punta TROCAR
TROCAR bevel



■ Ampie fessure di aspirazione
Wide side ports

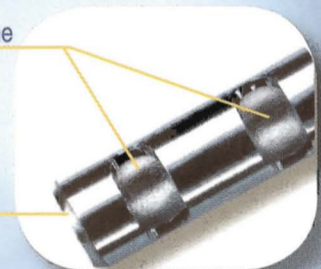

■ Affilatura circolare
Razor sharpened
cutting profile




SET **btt®**

Mandrino supplementare
Spare trocar


Stopper di profondità
Depth limiting device

SET PER ESPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

BONE-MARROW HARVESTING NEEDLE-SET

 BTT® è il set monouso per espianto di midollo osseo studiato per ottenere i massimi risultati consentiti dalla tecnologia costruttiva più avanzata.

- ▶ Il set comprende un mandrino trocar di scorta per rendere più sicura l'intera procedura.
- ▶ Impugnatura ergonomica con superficie anti-scivolamento, per una manovra più confortevole ed efficace per l'operatore.
- ▶ Impiego di acciai inossidabili di elevata qualità e resistenza, per ridurre al minimo l'usura dei taglienti anche in caso di interventi multipli.
- ▶ Stopper scorrevole sulla cannula, per valutare l'opportuna profondità di penetrazione.
- ▶ Affilatura della cannula con rastrematura altamente penetrante.
- ▶ Geometria trocar del mandrino, per una migliore penetrazione con minore invasività.
- ▶ Ampie fessure di aspirazione sulla cannula, per una efficace raccolta del midollo osseo.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 BTT® is the bone-marrow harvesting needle-set designed to reach the best result, up-dated in accordance with the state of the art of the technology.

- ▶ It is supplied as a set including a spare trocar stylet, to make the whole procedure safer.
- ▶ The ergonomical non-slip handle, ensures a more comfortable and safer procedure.
- ▶ Manufactured from high quality strengthened stainless steel, wear of the cutting edges is drastically reduced, even if used for multiple procedures.
- ▶ Depth limiting device on cannula, to evaluate and decide proper bioptic depth.
- ▶ Highly penetrating sharpened edge of cannula.
- ▶ Trocar bevel of stylet, for a better penetration with lower invasiveness.
- ▶ Wide side-ports on cannula, for improved collection of bone-marrow.
- ▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

btt®

| CALIBRO SIZE G (mm) | LUNGHEZZA LENGTH cm | CODICE COLORE COLOUR CODE | CONFEZ. PKG pz-units |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 11 (3,00) | 9 - 13 | bianco / white | 5 |
| 13 (2,40) | 7 - 11 | azzurro / cyan | 5 |

Come comporre il codice d'ordine / ordering: BTT 11 Gauge - 9 cm = BTT1109

CE
0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

