

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS

Radiation Oncology Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com


Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

AGO DI CHIBA MONOUSO PER BIOPSIA CITOLOGICA
DISPOSABLE CHIBA-TYPE CYTOLOGIC BIOPSY NEEDLE


COMPLETECHIBA®



Punta atraumatica
tipo Quincke
Non - traumatic
Quincke bevel

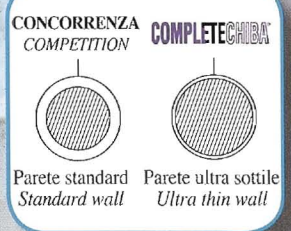


- Codice colore
Colour coded hub
- Doppia lente di ingrandimento
Double magnifying lens
- Dente di fasatura per ago introduttore
Phasing tooth for introducer needle
- Centimetratura
Centimetre marking
- Stopper di profondità
Depth limiting device

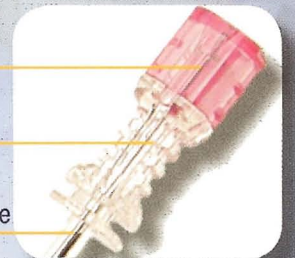

AGO DI CHIBA MONOUSO PER BIOPSIA CITOLOGICA

DISPOSABLE CHIBA-TYPE CYTOLOGIC BIOPSY NEEDLE

 **COMPLETE CHIBA®:** ago monouso per biopsia citologica tipo Chiba prodotto con il consueto elevato standard qualitativo di STERYLAB.

- ▶ Punta tipo *Quincke*, per una migliore e meno traumatica penetrazione.
- ▶ Cannula a parete ultra-sottile, per una più facile ed abbondante aspirazione.
- ▶ Acciaio di elevata qualità medica ed elevata rigidità.
- ▶ Centimetratura e stopper scorrevole.
- ▶ Marker ecogeno interno distale, per una ottimale e sicura visualizzazione ecografica.
- ▶ Impugnatura trasparente con doppia lente di ingrandimento e dente di fasatura per ago introduttore.
- ▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.
- ▶ Ampia gamma dimensionale in grado di soddisfare le diverse esigenze dell'operatore.
- ▶ Monouso, sterile:
riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 **COMPLETE CHIBA®** is a Chiba-type biopsy needle designed and manufactured by STERYLAB in compliance with its high quality standard.

- ▶ *Quincke-type bevel facilitates and makes penetration less invasive.*
- ▶ *Ultra-thin walled cannula permits an abundant sampling collection.*
- ▶ *Needle is made from high quality stainless steel with increased stiffness.*
- ▶ *Easy-to-read centimetre marks and sliding stopper facilitate accurate depth placement.*
- ▶ *Inner echo-marker provides clear echographic visibility.*
- ▶ *Hubs are colour coded for easier needle size (Gauge) determination.*
- ▶ *Available in a variety of gauge sizes and centimetre lengths.*
- ▶ *Sterile, single-use: reduction of infection hazard.*

MODELLI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES	CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CODICE COLORE COLOUR CODE	CONFEZ. PCKG pz-units
COMPLETECHIBA®	18 (1,20)	7 - 9 - 11 - 15 - 20 - 25 - 35	rosa / pink	30
	20 (0,90)	7 - 9* - 11* - 15* - 20 - 25 - 35	giallo / yellow	30
	21 (0,80)	7 - 9* - 11* - 15* - 20 - 25	verde / green	30
	22 (0,70)	7 - 9* - 11* - 15* - 20 - 25	nero / black	30
	23 (0,65)	7 - 9 - 11 - 15 - 20	azzurro / blue	30
	25 (0,50)	5 - 7 - 9 - 11	arancio / orange	30

Come comporre il codice d'ordine / ordering: **COMPLETE-CHIBA® 20 Gauge-15 cm = CCH2015**
 Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request

(*): Disponibile anche in versione per Risonanza Magnetica Nucleare: aggiungere "MR" al codice d'ordine.
 Sizes available also in specific MRI compatible model: add "MR" to the cat.nr.

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology Equipment and Services

