

STERYLAB PRODUCT RANGE

*Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti*

For further information or a quotation please contact : Colin Walters



SeedOS _{Ltd}

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com

Website: www.seedos.com Mobile: +44 07701059163

**SET PER BIOPSIA EPATICA SECONDO MENGHINI
DISPOSABLE MENGHINI LIVER BIOPSY SET**

HEPA-CUT[®]

Aghi per biopsia di elevata qualità forniscono adeguati campioni istologici per una corretta diagnosi e caratterizzazione di lesioni sospette.

High quality core biopsy needles provide histologic information for diagnosis and characterization of suspect lesions.

■ Specillo di sicurezza
Inner safety plug

■ Limitatore di profondità
Depth limiting device

■ Cannula ad affilatura ultra-tagliente
Razor sharp cutting edge

■ Siringa con blocco automatico
Auto-blocking syringe


SET **HEPA-CUT[®]**

■ Bisturi
Scalpel

■ Cannula bioptica
Bioptic cannula


■ Siringa autobloccante 12 ml
Auto-block 12 ml syringe

■ Ago ipodermico
Hypodermic needle

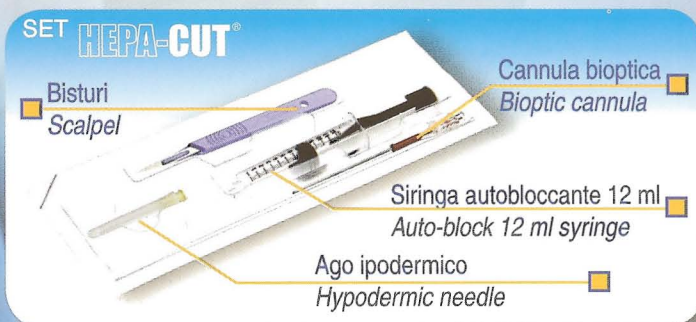


SET PER BIOPSIA EPATICA SECONDO MENGHINI

DISPOSABLE MENGHINI LIVER BIOPSY SET

 HEPA-CUT®: set monouso per biopsia epatica secondo la metodica tradizionale di Menghini, perfeziona gli strumenti fino ad ora in commercio e ne risolve gli inconvenienti:

- ▶ L'affilatura ultra tagliente della cannula dona sempre campioni abbondanti.
- ▶ L'arresto d'aspirazione a scatto consente una definitiva sicurezza contro lo sganciamento accidentale dello stantuffo.
- ▶ Lo speciale specillo di sicurezza impedisce che il cilindro bioptico possa finire in siringa.
- ▶ Il set HEPA-CUT®, completo di siringa, cannula bioptica, bisturi, ago per fisiologica, semplifica il lavoro dell'ambulatorio e previene rischi di contagio.
- ▶ Monouso, sterile:
riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 STERYLAB, leader in the design and manufacturing of biopsy instruments, introduces HEPA-CUT, the liver biopsy set according to the traditional Menghini method.

- ▶ HEPA-CUT® is the best instrument available to date offering the perfect solution.
- ▶ Ultra-sharp cutting edge of cannula always ensures abundant samples.
- ▶ The special inner plug prevents bioptic specimen from entering the syringe.
- ▶ Special self-springing lock device ensures absolute safety against the accidental detachment of the piston from the syringe.
- ▶ The set HEPA-CUT®, including syringe, bioptic cannula, scalpel, needle for saline solution, simplifies the clinical work and avoids the risk of contamination.
- ▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard .

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

HEPA-CUT®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CONFEZ. PKG pz-units
16 (1,60)	9	25
17 (1,40)	9	25
18 (1,20)	9	25

Come comporre il codice d'ordine / ordering:
HEPA - CUT® 16 Gauge - 9 cm = HPC1609
Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:



www.seedos.com

Radiation Oncology Equipment and Services

